



PHYSIO PACK

Timer Function Pack Warmer

取扱説明書

Instruction manual

正しく安全に使用していただくために、
お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその区分を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次の通りです。

 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
 注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

 禁止	 ぬれ手禁止
 接触禁止	 指示を守る
 分解禁止	 電源プラグを抜く
 水ぬれ禁止	 アース線を必ず接続する

⚠ 警告 または ⚠ 注意

-  電源プラグを潰したり電源ケーブルの上に物を乗せたり、折ったり、束ねたりしないでください。電源ケーブルが傷つき、発熱・発火の原因になります。
-  傷んだケーブルやプラグ、差込口のゆるいコンセントは使用しないでください。感電・発火の原因になります。
-  電源プラグはケーブルを持たず、必ずプラグ部を持って抜き差ししてください。ケーブルが傷み、感電・発火の原因となります。
-  熱交換口や装置の穴に針金などを差し込まないでください。感電・火災の原因になります。
-  本機の上に物を置かないでください。落下してケガをしたり、本機の変形による故障で火災の原因になります。
-  本機に毛布や布、紙などをかぶせないでください。発熱などにより火災の原因になります。
-  直射日光の当たる場所や暖房器具などの熱風が当たる場所には設置しないでください。本機が変形したり、発熱による発火の原因になります。
-  揮発性の発火しやすいものを本機の中に入れたり、本機の上に置かないでください。ベンジン・化粧品・整髪料などは、発火の原因になります。
-  可燃性スプレーを本機の近くで使用しないでください。電気接点の火花で引火・火災の原因になります。
-  液体を入れた容器を本機の上に置かないでください。本機に液体がかかると感電・火災の原因になります。
-  水洗いをしたり、液体を本機にかけないでください。感電・火災の原因になります。



水のかかる場所や、湿気の多い場所への設置は避けてください。感電・火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



熱くなった庫内の内壁やトレイ、空気循環用ファンにはさわらないでください。火傷・ケガ・感電の原因になります。



薬品などを本機の中で保管しないでください。発火・火災の原因になります。



分解・修理・改造をしないでください。ケガ・感電・火災の原因になります。



電源は、100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。延長コードの使用、タコ足配線は、発熱・発火の原因になります。



電源プラグのホコリは定期的に取り除いてください。火災の原因になります。



アースを必ず接続してください。アースが不完全な場合は、感電・火災の原因になります。



異常を感じた時（焦げ臭い匂い、異常な高温）は、電源プラグを抜き、運転を中止してください。異常のまま運転をすると感電や火災の原因になります。



本機を清掃するときは、必ず電源プラグを抜いてから行なってください。感電の原因になります。



本機を倒したり落下させたり強い衝撃を与えないでください。故障・事故の原因になります。

取扱い上の注意

- ・ 設置の際は「本体の設置について (P.4)」をよく読み、正しく設置してください。
- ・ 本機を使用する際に、正しく動作する事を日常的に点検してください。事前の点検で異常が見られた時は必ず販売店へご連絡ください。
- ・ 本機を清掃する際は、シンナーなどの揮発油や磨き粉などは使用しないでください。乾いた布、または中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いてください。
- ・ 長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。また、再使用の際は使用前に正常に作動することを確認してください。

以下の場合には電源プラグを抜いて使用を中止し、販売店へ修理を依頼してください。

- ・ 主電源スイッチ、POWER ボタンを ON にしても電源が入らない。
- ・ 焦げ臭い匂いや煙がでる。
- ・ 電源プラグやケーブル、本体が異常な高温になる。
- ・ 異常な音がする。
- ・ ブレーカーが落ちる。

※その他、異常を感じた時や故障した時は本機を開けたりせず、必ずすぐに電源プラグを抜いて修理を依頼してください。


本体の設置について

設置場所について


- ・ 直射日光のあたる場所や、エアコン、暖房器具の熱風が当たる場所は避けてください。
- ・ 屋外への設置は避けてください。
- ・ 湿気の多い所や、水道の近くなどの水のかかる恐れのある場所は避けてください。
- ・ 丈夫で水平な場所に設置してください。じゅうたんなど脚部が沈みやすい場所への設置は避けてください。
- ・ 他の電子機器から離れた場所へ設置してください。病院など人体に支障をあたえる機器がある場所では十分に確認のうえ、設置してください。

設置時のご注意

- ・ 本機の周囲に放熱スペースを空けて設置してください。（左右・背面は 10cm 以上、上部は 50cm 以上のスペースをとってください。）

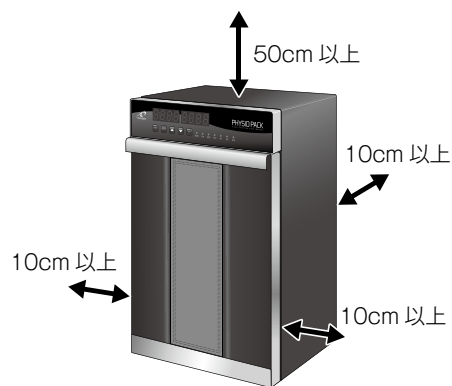

- ・ アースを必ず接続してください。
本機の電源ケーブルはアース端子付電源ケーブルです。アース端子付コンセントが無い場合は、電気工事を依頼してください。また、電源は AC100V・定格 15A 以上のコンセントをタコ足配線をせず、単独で使用してください。

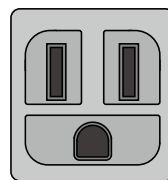

アース端子付コンセント



アース端子付電源ケーブル

本体各部名称及び仕様

本体各部名称



操作パネル



- ① 設定温度・設定時刻等表示 LED
- ② POWER ボタン
- ③ FUNCTION ボタン

- ④ 選択ボタン
- ⑤ SET ボタン
- ⑥ 曜日表示 LED

本体仕様

定格電源	AC100V
消費電力	380W
本体寸法	W505 × H765 × D430(mm)
庫内寸法	W420 × H560 × D320(mm)
庫内容量	75L
本体重量	50kg (本体 44.4kg、トレー 5.6kg)
温度調節幅	40℃～75℃ (加温防止装置付)

タイマー機能	ON / OFF デジタルタイマー
動作環境	10℃～30℃ / 湿度 70% 以下
付属品	トレー 7 枚、電源ケーブル 1 本

パックの取扱いについて

パックの取扱いについて


- ・ 一列にパックを詰めすぎないようにしてください。パックの温度が上がりにくくなります。
- ・ パックが濡れた場合は、完全に乾かしてから使用してください。
- ・ 内袋及び専用カバーの汚れがひどい場合や糸のほつれ、破れなどがある場合は新品と交換してください。
- ・ パックは十分に温めてから使用してください。ただし、高温になったパックを直接肌に当てたり、長時間当てすぎたりしないでください。患部が衣服などに覆われていても、薄手の衣服の場合はタオルなどで適温になるように調節してください。
- ・ パックを患部に当てている最中に上から押さえたりして圧迫しないでください。
- ・ 治療前に患者が少しでも熱いと感じたときには我慢せず、すぐにパックを外すように説明してください。また、治療中は患者のそばから離れないようにしてください。
- ・ パックに付属している添付文書をよく読んでご使用ください。
- ・ 本機（ウォーマー）は医療機器ではありません。

フィジオパック S

サイズ：W165 × H105(mm)、重量：260g、医療機器届出番号：11B3X10037PPS001 号



1 段に 5 枚入ります。奥の方へ入れると熱くなった内壁やトレーに手が触れて危険ですので注意してください。

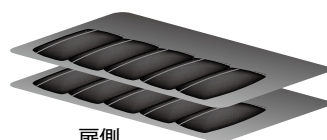


扉側

フィジオパック M

サイズ：W290 × H150(mm)、重量：940g、医療機器届出番号：11B3X10037PPM002 号



1 段に 3 枚入ります。奥の方へ入れると熱くなった内壁やトレーに手が触れて危険ですので注意してください。

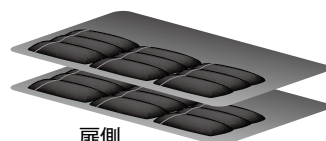


扉側

フィジオパック L

サイズ：W585 × H150(mm)、重量：1300g、医療機器届出番号：11B3X10037PPL001 号



二つ折りにする

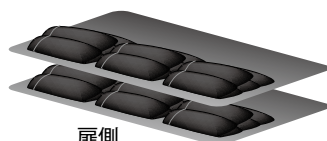

扉側



1 段に 3 枚入ります。2 つ折りにして入れてください。奥の方へ入れると熱くなった内壁やトレーに手が触れて危険ですので注意してください。

操作方法

運転を始める前に

- ・電源を入れ、運転を始める前に必ず「安全上のご注意 (P.2 ~ 3)」 「本体の設置について (P.4)」をよく読み、正しくお使いください。
- ・電源を入れてもすぐに設定温度にはなりません。75℃まで上昇するのに約2～4時間(外気温度やパックの収容枚数などの条件により変化します。) かかります。希望の時間に設定温度になるようにタイマーを設定してご使用ください。

電源の ON / OFF について

- ① 本体背面下部の主電源スイッチを ON にします。
主電源が ON になり、現在時刻が左側 LED に表示されます。



- ② 操作パネルの POWER ボタンを押します。電源が ON になり、右側 LED (現在の庫内温度) と、曜日表示 LED が点灯します。



- ③ もう一度操作パネルの POWER ボタンを押すと電源が OFF になり、右側 LED と曜日表示 LED が消灯します。



※主電源のみを ON にしても庫内の温度は上がりません。操作パネルの POWER ボタンを押し、右側 LED、曜日表示 LED が点灯している状態で庫内の温度が上がり始めます。

※セットした OFF 時間の前に電源を落としたい場合など、タイマーをセットしている状態でも POWER ボタンにより電源の ON / OFF は可能です。

※主電源スイッチが OFF の時はタイマーは作動しません。


操作方法

温度設定について (FUNCTION 1)


① FUNCTION ボタンを 2 秒以上長押しします。




② 左側 LED に F01 と表示されます。

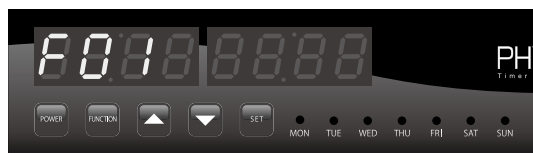


③ SET ボタンを押します。

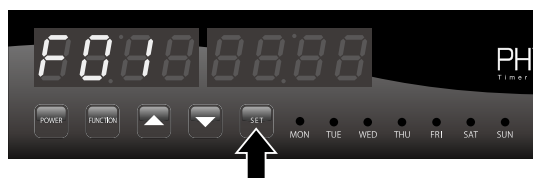

④ 左側 LED に現在の設定温度が表示されます。
希望の温度まで選択ボタン ▲ ▼ を押して設定します。

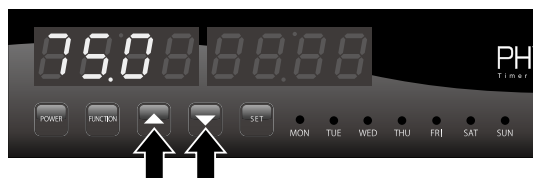

⑤ SET ボタンを押します。ピーという決定音が鳴り、温度が設定され、通常の時刻表示に戻ります。

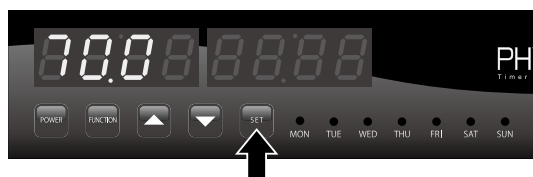


タイマー設定について (FUNCTION 2)


- ① FUNCTION ボタンを 2 秒以上長押しします。



- ② 左側 LED に F01 と表示されます。

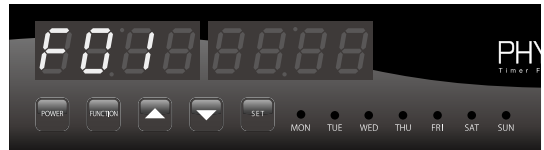


- ③ 選択ボタンの左側  を押し、F02 を表示させ、SET ボタンを押します。

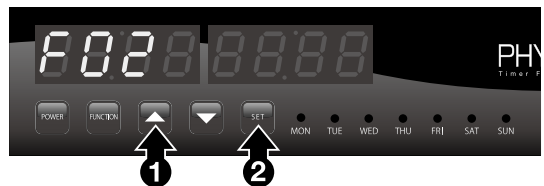

- ④ 曜日表示 LED の〈MON〉が点滅します。選択ボタン   を押すと点滅が 1 つずつ移動しますので、設定したい曜日を点滅させて SET ボタンを押します。



- ⑤ 左側 LED (ON タイム) を設定します。選択ボタン   を押すと時刻が変更されます。希望の時刻に合わせて SET ボタンを押します。

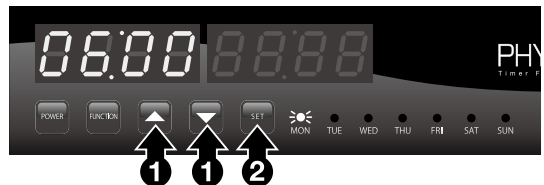

 左側選択スイッチ

OFF → 00:00 → 00:01 → 01:00 → 02:00 →

 右側選択スイッチ

OFF → 23:59 → 23:58 → 23:00 → 22:00 →

選択スイッチ長押しで時間が早送りされます。


23:59 と 00:00 の間が OFF になります。

操作方法


- ⑥ 右側 LED (OFF タイム) を設定します。選択ボタン  を押すと時刻が変更されます。希望の時刻に合わせて SET ボタンを押します。



- ⑦ 設定した曜日のタイマーがセットされ、次の曜日の LED が点滅します。手順④に戻り④～⑥を繰り返します。

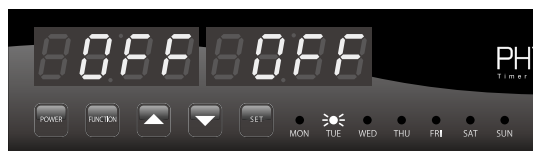

- ⑧ 全ての設定が終了したら SET ボタンを 1 秒以上長押しします。ピーという決定音が鳴り、タイマー設定内容が登録され、通常の時刻表示に戻ります。

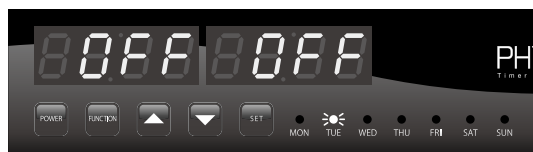

※主電源スイッチが OFF の時はタイマーは作動しません。


現在時刻・曜日設定について (FUNCTION 3)

工場出荷時には現在の時刻、曜日が設定されています。


- ① FUNCTION ボタンを 2 秒以上長押しします。




- ② 左側 LED に F01 と表示されます。

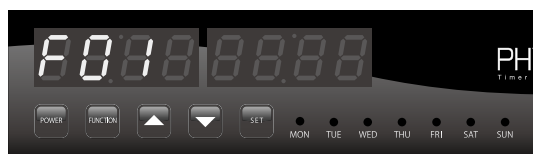


- ③ 選択ボタンの右側  を押し、F03 を表示させ、SET ボタンを押します。

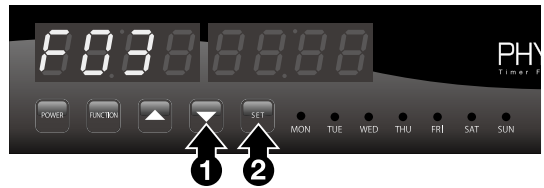

- ④ 曜日表示 LED が点滅します。選択ボタン   を押し、現在の曜日に合わせて SET ボタンを押します。

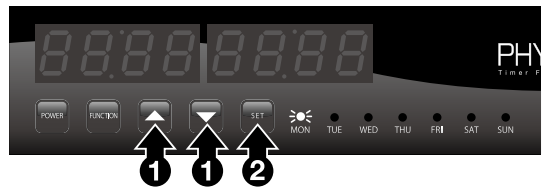


- ⑤ 左側 LED に時刻が表示されます。選択ボタン   を押し、現在時刻に合わせて SET ボタンを押します。ピーという決定音が鳴り、現在時刻・曜日が設定され、通常の表示に戻ります。

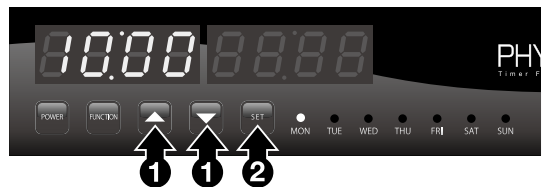

エラー表示について

本機に異常が起きた場合は左側 LED に E01 ~ のエラー番号が表示されます。

自分で分解・修理をせず、エラー番号を販売店へ連絡し、修理を依頼してください。

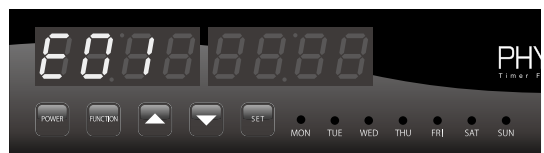

発売元



フィジオプラス株式会社

www.physioplus.jp info@physioplus.jp

本社：〒176-0011 東京都練馬区豊玉上2-2-5 桜台ツウウズビル 3F
TEL：03-3993-1141 FAX：03-3993-1140

札幌支店：〒062-0034 北海道札幌市豊平区西岡四条1-13-24-101
TEL：011-301-2200 FAX：011-300-2202

福岡支店：〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田2-10-29
オフィスバレー井相田Ⅱ A棟5号室
TEL：092-210-2200 FAX：092-215-2202

仙台出張所：〒984-0822 宮城県仙台市若林区かすみ町6-37

製造販売元 アイソン株式会社 〒332-0032 埼玉県川口市中青木3-10-43